



Comment...

mesurer sa tension artérielle ?

Autotensiomètre Microlife® BP-3BU1-4.

Autotensiomètre Microlife® BP-3BUI-4

Ecran à cristaux liquides

Connection PC

Bouton Temps

Couvercle
du logement
des piles

Bouton Mémoire
Bouton imprimante


Interrupteur
de sélection de mode

Bouton de
mesure 0/I

Brassard
pour poignet



Mise en place des piles

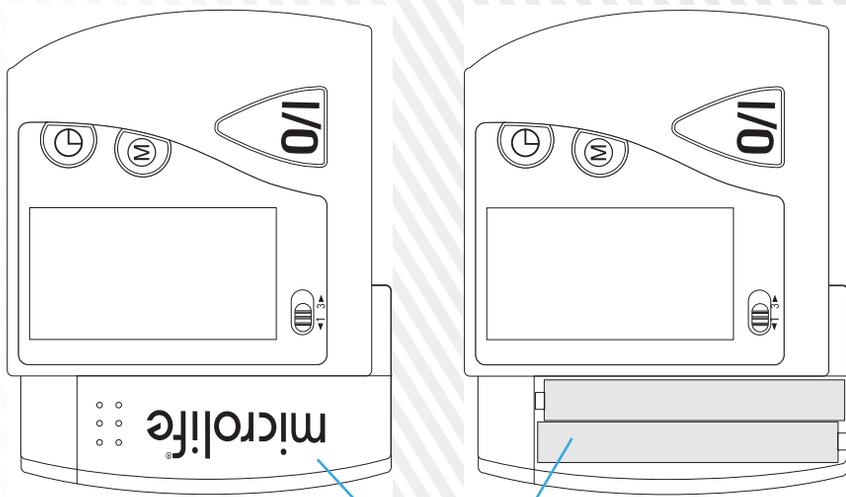



Insérez les piles (2 x taille AAA 1.5 V).
Une fois les piles mises en place,
l'appareil émettra 2 bips brefs.

Réglage de la date et l'heure

Une fois les nouvelles piles mises en place, l'utilisateur sera invité à régler l'heure et la date. Vous devez alors remettre la date et l'heure précise (exemple : entrer 2003-06-20 Time 09:30).




Appuyez sur le bouton Temps pour passer à l'année.
L'année clignotera alors.

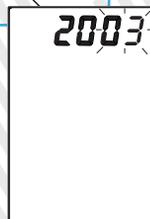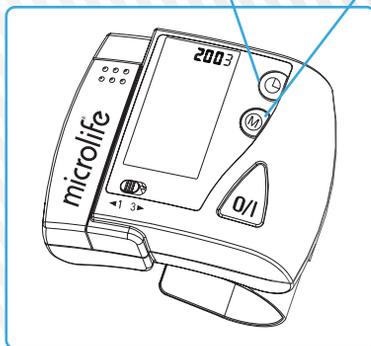


Vous pouvez entrer l'année correcte en appuyant sur le bouton Mémoire.

A chaque pression sur les boutons Temps ou Mémoire correspond une entrée (passage en mode heure ou mode minute ou modifications).
Vous pouvez aussi régler le mois, le jour et l'heure.

Installation

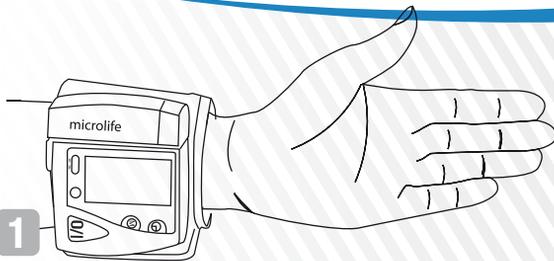


Glissez le brassard sur le poignet.

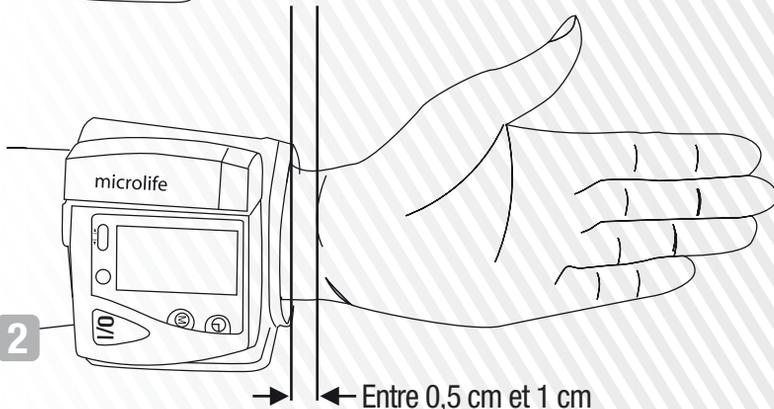

La distance entre le brassard et le poignet doit être d'environ 1 cm.

Fixez le brassard avec la bande auto-agrippante autour du poignet gauche, le cadran vers la paume. Il doit être placé confortablement, pas trop serré. Il ne doit pas rester d'espace libre (de jeu) entre le brassard et le poignet.



Installation

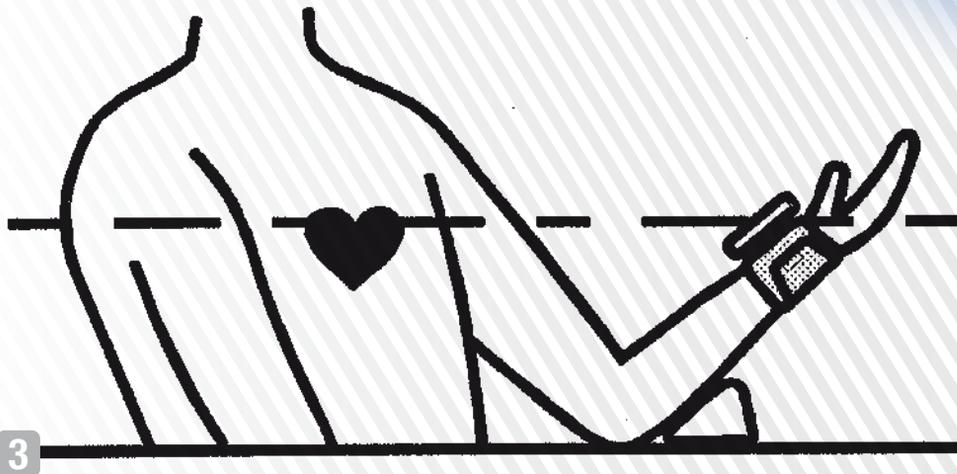

Installez-vous dans un endroit calme, et restez au repos pendant 5 minutes.

Posez le bras sur la table, la paume vers le haut. Posez le coude sur un support, et placez l'avant-bras sur la boîte de façon à ce que le brassard soit au même niveau que le cœur.

Sélection du mode de mesure

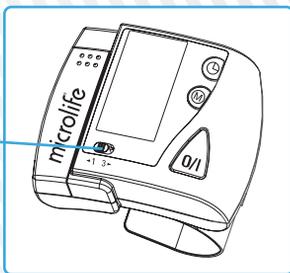
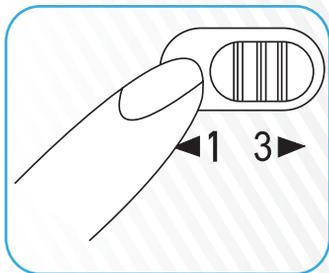


Le mode moyenne : MAM

Mettez le commutateur sur la position « 3 ».

L'appareil prendra 3 mesures successives, toutes les 15 secondes. 1 bip sonnera 5 secondes avant la mesure. L'appareil calcule alors la moyenne des mesures.

OU

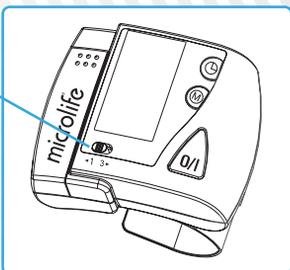
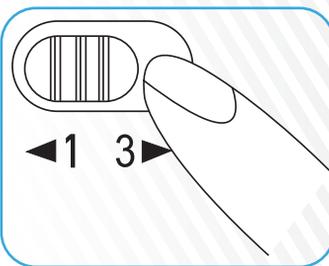


Le mode simple :


Mettez le commutateur sur la position « 1 ».

L'appareil prendra 1 seule mesure.

Prise de la mesure

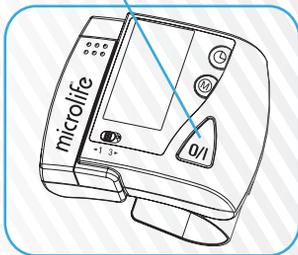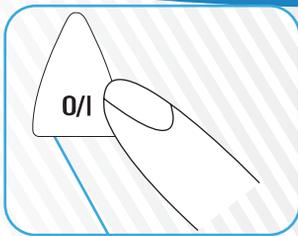


Appuyez sur le bouton 0/I ;
l'appareil procédera à un
calibrage par remise à zéro.
En même temps vous entendrez
3 bips longs et 2 bips courts.

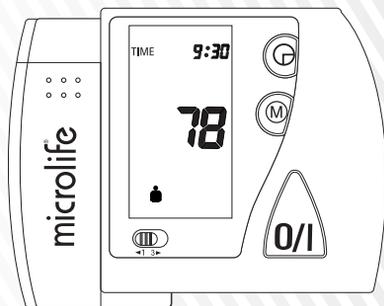


Une fois le brassard
correctement gonflé, la
pompe s'arrête et la pression
chute progressivement.

Prise de la mesure

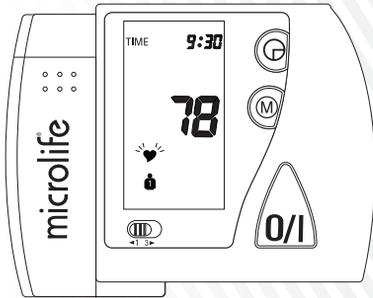

Dès que l'appareil détecte un battement, le symbole du coeur sur l'afficheur commence à clignoter et un bip retentit pour chaque battement de coeur.

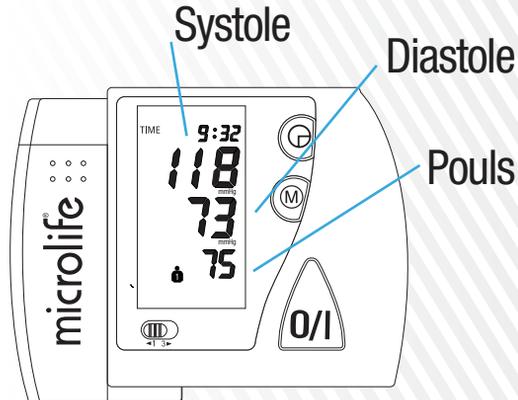

Un bip plus long retentit pendant 3 secondes une fois la mesure prise. Les tensions systolique et diastolique ainsi que le pouls s'affichent alors. En mode MAM, la même opération se répète trois fois. Le résultat sera automatiquement conservé dans la mémoire du tensiomètre.



Dinno Santé



▶ N°Cristal 09 69 393 394

APPEL NON SURTAXE



Dinno Santé,
1 rue Raoul Follereau
77600 Bussy-Saint-Georges



info@dinnosante.fr



DinnoSante.fr



Dinno Santé est une activité d'Air Liquide Healthcare.